

Version 2

Jul 04, 2021

# Coleta de dados actigráficos - ActTrust V.2

Daniel Vartanian<sup>1</sup><sup>1</sup>University of Sao Paulo

In Development



Share

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bwbnpame

Interdisciplinary Sleep Research Group (GIPSO)

Tech. support email: [gipso-each@usp.br](mailto:gipso-each@usp.br)Daniel Vartanian  
University of Sao Paulo

## DISCLAIMER

### DISCLAIMER – FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY; USE AT YOUR OWN RISK

The protocol content here is for informational purposes only and does not constitute legal, medical, clinical, or safety advice, or otherwise; content added to [protocols.io](https://protocols.io) is not peer reviewed and may not have undergone a formal approval of any kind. Information presented in this protocol should not substitute for independent professional judgment, advice, diagnosis, or treatment. Any action you take or refrain from taking using or relying upon the information presented here is strictly at your own risk. You agree that neither the Company nor any of the authors, contributors, administrators, or anyone else associated with [protocols.io](https://protocols.io), can be held responsible for your use of the information contained in or linked to this protocol or any of our Sites/Apps and Services.

## ABSTRACT

Esta coleção reúne os protocolos do processo de coleta de dados actigráficos do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Sono (GIPSO). O processo foi desenhado para os actígrafos provenientes da companhia [Condor Instruments](#). Algumas das configurações mencionadas podem ser específicas desses aparelhos.

Se você não é membro ou parceiro do GIPSO, você pode utilizar esta coleção como referência para o processamento de seus equipamentos. Neste caso, por favor, não envie os formulários mencionados nos protocolos relacionados ao processo.

Se você utilizar os protocolos do GIPSO em sua pesquisa, por favor considere citá-los na seção de materiais e métodos de sua estudo. Nós nos esforçamos bastante para elaborar e manter protocolos de acesso aberto à comunidade científica. Você pode encontrar a citação dos protocolos na aba **metadata**.

Consulte a aba **Guidelines** para visualizar o fluxograma do processo como um todo.

Para dúvidas ou sugestões, entre em contato pelo e-mail [gipso@usp.br](mailto:gipso@usp.br).

## DOI

[dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bwbnpame](https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bwbnpame)

## COLLECTION CITATION

Daniel Vartanian 2021. Coleta de dados actigráficos - ActTrust. **protocols.io**<https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.bwbnpame>

Version created by Daniel Vartanian

## KEYWORDS

actigrafia, actimetria, sono, cronobiologia, condor instruments

## LICENSE

This is an open access collection distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

## CREATED

Jul 04, 2021

## LAST MODIFIED


Jul 04, 2021

## COLLECTION INTEGER ID

51278

## GUIDELINES

O processo de coleta de dados actigráficos do GIPSO segue o seguinte fluxograma.

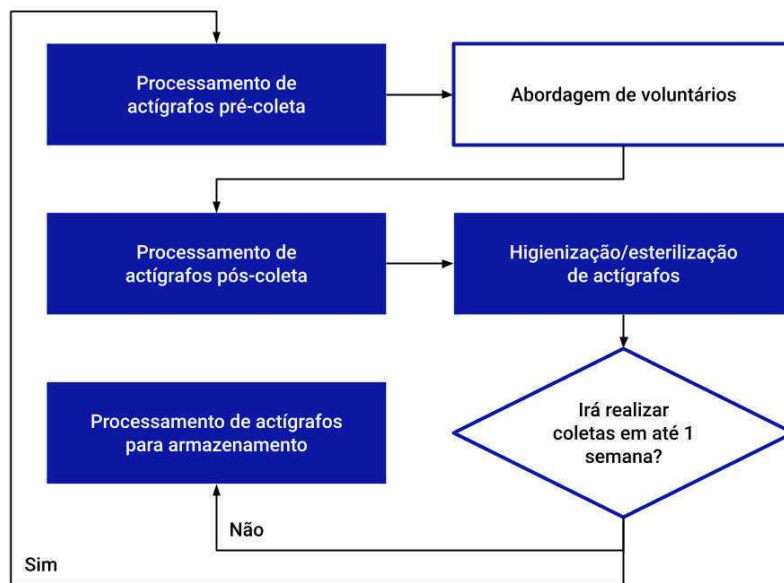

Fluxograma do processo de coleta de dados actigráficos do GIPSO.

**Fonte:** elaborado pelo autor.

A etapa *Abordagem de voluntários* não tem um protocolo geral, pois ela irá variar de acordo com o estudo.

## DISCLAIMER:

DISCLAIMER – FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY; USE AT YOUR OWN RISK

The protocol content here is for informational purposes only and does not constitute legal, medical, clinical, or safety advice, or otherwise; content added to [protocols.io](https://protocols.io) is not peer reviewed and may not have undergone a formal approval of any kind. Information presented in this protocol should not substitute for independent professional judgment, advice, diagnosis, or treatment. Any action you take or refrain from taking using or relying upon the information presented here is strictly at your own risk. You agree that neither the Company nor any of the authors, contributors, administrators, or anyone else associated with [protocols.io](https://protocols.io), can be held responsible for your use of the information contained in or linked to this protocol or any of our Sites/Apps and Services.

## ABSTRACT

Esta coleção reúne os protocolos do processo de coleta de dados actigráficos do Grupo Interdisciplinar de

Pesquisa em Sono (GIPSO). O processo foi desenhado para os actígrafos provenientes da companhia [Condor Instruments](#). Algumas das configurações mencionadas podem ser específicas desses aparelhos.











Se você não é membro ou parceiro do GIPSO, você pode utilizar esta coleção como referência para o processamento de seus equipamentos. Neste caso, por favor, não envie os formulários mencionados nos protocolos relacionados ao processo.

Se você utilizar os protocolos do GIPSO em sua pesquisa, por favor considere citá-los na seção de materiais e métodos de sua estudo. Nós nos esforçamos bastante para elaborar e manter protocolos de acesso aberto à comunidade científica. Você pode encontrar a citação dos protocolos na aba **metadada**.

Consulte a aba **Guidelines** para visualizar o fluxograma do processo como um todo.

Para dúvidas ou sugestões, entre em contato pelo e-mail [gipso@usp.br](mailto:gipso@usp.br).

#### FILES

-  Conexão do actígrafo no computador - ActTrust - V.1  
**Version 1**  
by Daniel Vartanian, University of Sao Paulo
-  Processamento de actígrafos pré-coleta - ActTrust  
**Version 2**  
by Daniel Vartanian, University of Sao Paulo
-  Processamento de actígrafos pós-coleta - ActTrust - V.2  
**Version 2**  
by Daniel Vartanian, University of Sao Paulo
-  Higienização/esterilização de actígrafos - ActTrust - V.1  
**Version 1**  
by Daniel Vartanian, University of Sao Paulo
-  Processamento de actígrafos para armazenamento - ActTrust - V.2  
**Version 2**  
by Daniel Vartanian, University of Sao Paulo